

# Prvi koraki

Kratka navodila za nove uporabnike

## ⚠ OPOZORILO

- Kratka navodila za nove uporabnike ne morejo nadomestiti podrobnih navodil za uporabo vašega merilnika ravnih glukoze v krvi Accu-Chek Guide. V navodilih za uporabo so pomembna navodila za rokovanje z merilnikom in druge informacije.
- Sprožilna naprava je samo za osebno uporabo.

## Pregled




- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1 Prikazovalnik                                | 5 Odprtina za testni listič z lučko |
| 2 Tipka za nazaj                               | 6 Pokrov predela za baterijo        |
| 3 Tipki s puščicama za gor in dol              | 7 Vrata za mikro USB                |
| 4 Tipka za vklop/izklop/nastavitev/OK (V redu) | 8 Tipka za izmet testnega lističa   |

## Nastavitev jezika in zapisa časa



Vključite merilnik, tako da na kratko pritisnete **OK**. Prikaže se **Language** (Jezik). Pritisnite **OK** ali **OK**, da označite zeleni jezik. Pritisnite **OK**.

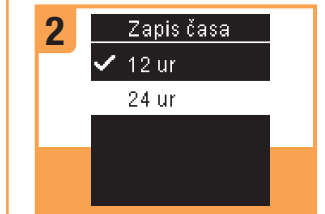


Prikaže se **Zapis časa**. Pritisnite **OK** ali **OK**, da označite **12 ur** (dop./pop.) ali **24 ur**. Pritisnite **OK**, da potrdite izbiro in se vrnete v **Glavni meni**.


## Priloga sprožilne naprave




Predstavitev sprožilne naprave Accu-Chek FastClix.

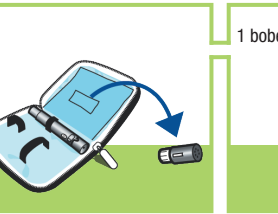

Iz torbice za shranjevanje vzemite bobeneček z lancetami.

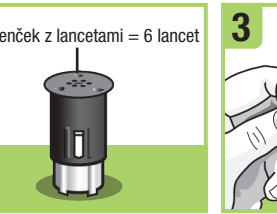


**OPOMBA**  
V vsakem bobenečku z lancetami je 6 sterilnih lancet.

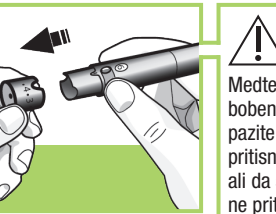


S sprožilne naprave snemite kapico. Pri tem kapice ne vrtite, ampak jo samo potegnite.


**⚠ OPOZORILO**  
Medtem ko vstavljate bobeneček z lancetami, pazite, da pomotoma ne pritisnete na sprožilni gumb ali da sprožilne naprave ne pritisnete s sprožilnim gumbom na mizo ali kaj podobnega. To bi namreč sprožilo lanceto in povzročilo nenamerno poškodbo ali škodo.

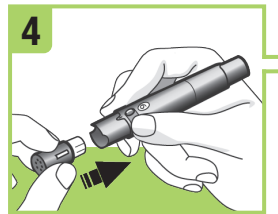


V sprožilno napravo vstavite bobeneček z lancetami, z belim delom naprej. Bobeneček z lancetami potisnite do konca, dokler se ne zaskoči s slišnim klikom.

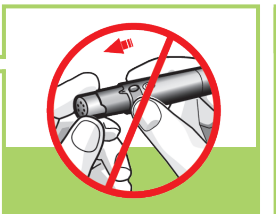

**OPOMBA:** Bobenčka z lancetami ne odstranjujte iz sprožilne naprave, dokler ne porabite vseh 6 lancet. Ko bobeneček z lancetami enkrat vzamete iz sprožilne naprave, ga ne morete več ponovno vstaviti za nadaljnjo uporabo.

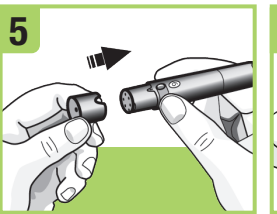


Na sprožilno napravo ponovno natakните kapico. Preverite, ali se zareza na robu kapice ujema z izbočenim izrisom na sprožilni napravi.

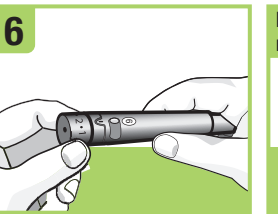

Nastavite zeleno globino vboda. Priporočamo, da na začetku izberete stopnjo 2. Pri debelejši koži priporočamo višjo stopnjo globine vboda.




Vzemite v roke sprožilno napravo in pritisnite na sprožilni gumb – z 1 klikom se sprožilna naprava napne in sproži.

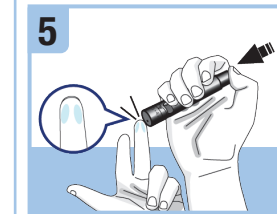

**Ko ste pripravljeni za merjenje ...**

## Merjenje ravnih glukoze v krvi

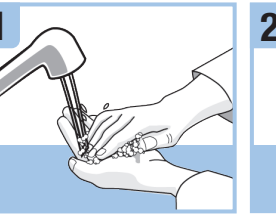


Pred začetkom merjenja ravnih glukoze v krvi si umijte in osušite roke.




Preverite rok uporabnosti, ki je odtisnjen na vsebniku s testnimi lističi. Ne uporabljajte testnih lističev po preteku roka uporabnosti.




Iz vsebnika s testnimi lističi vzemite en testni listič. Nato vsebnik trdno zaprite.

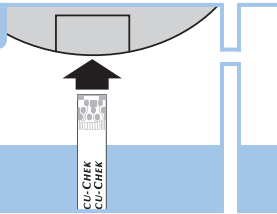


Kovinski konec testnega lističa vstavite v merilnik.

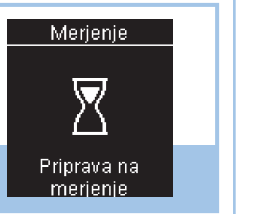

Merilnik se vključi. Na prikazovalniku se izpiše **Priprava na merjenje**.

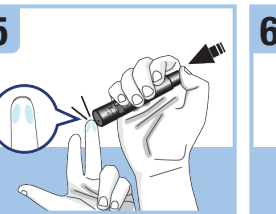


Sprožilno napravo trdno prisolnite na stranski del prstne blazinice in pritisnite sprožilni gumb do konca, da se zbudete v prst.

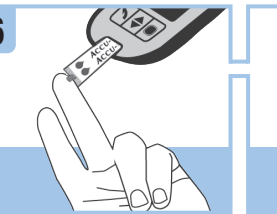

Z **rumenim robom** testnega lističa se dotaknite kapljice krvi. Ko se na prikazovalniku izpiše **Pridobivanje rezultata**, umaknite prst od testnega lističa. Krvi ne nanašajte na vrh testnega lističa.



V manj kot 4 sekundah se na prikazovalniku izpiše rezultat merjenja.

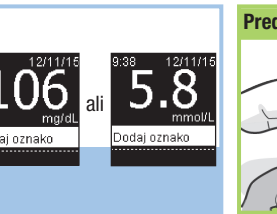

Sprožilno napravo pripravite za naslednje merjenje. Gumb na strani sprožilne naprave potisnite naprej in nazaj, da se pripravi naslednja lanceta. V okencu se prikaže število preostalih lancet.



**Preden končate ...**

Prenesite si brezplačno aplikacijo\* za vodenje sladkorne bolezni Accu-Chek Connect:



\* Na voljo za izbrane mobilne naprave

ZADNJA SPREMEMBA: 2015-09

Roche Diabetes Care GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim, Germany  
www.accu-chek.com



ACCU-CHEK, ACCU-CHEK CONNECT, ACCU-CHEK GUIDE in FASTCLIX so blagovne znamke družbe Roche.

APPLE, logotip APPLE in APP STORE so blagovne znamke družbe Apple Inc.

GOOGLE PLAY je blagovna znamka družbe Google Inc.

© 2016 Roche Diabetes Care  
07656939001-0216  
07656939001(01)-0216



# Mula Di Sini

## Panduan Ringkas

### ⚠️ AMARAN

- Panduan ringkas ini tidak menggantikan panduan pengguna untuk meter glukosa darah Accu-Chek Guide anda. Panduan pengguna mengandungi arahan pengendalian dan maklumat tambahan yang penting.
- Alat pencucuk bertujuan untuk kegunaan peribadi sahaja.

### Gambaran Keseluruhan




- 1 Paparan
- 2 Butang kembali
- 3 Butang anak panah atas dan anak panah bawah
- 4 Butang Hidup/Mati/Set/OK
- 5 Slot jalur ujian dengan lampu
- 6 Penutup tempat bateri
- 7 Port USB mikro
- 8 Pelenting jalur ujian

### Tetapkan Bahasa dan Format Masa



Hidupkan meter dengan menekan sekali **Language** (Bahasa) muncul. Tekan **English** atau **Dansk** untuk sorotkan bahasa yang diingini. Tekan **OK**.

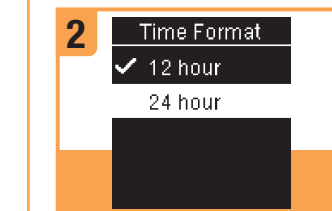


**Time Format** (Format Masa) muncul. Tekan **12 hour** atau **24 hour** untuk sorotkan **12 hour** (12 jam) (am/pm) atau **24 hour** (24 jam). Tekan **OK** untuk menetapkan pilihan dan kembali ke **Main Menu** (Menu Utama).

### Tetapkan Alat Pencucuk




Kenali alat pencucuk Accu-Chek FastClix.

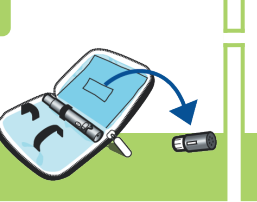

Dapatkan gelendong jarum dari kocek di dalam bekas.




1 gelendong jarum = 6 jarum

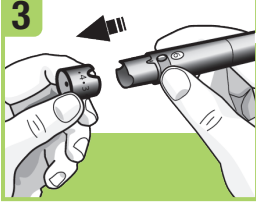


**NOTA**  
Setiap gelendong jarum mengandungi 6 jarum steril.



Tanggalkan penutup dengan menariknya keluar. Jangan memusing penutup.

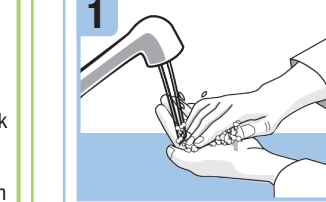


**AMARAN**  
Anda harus tidak memasukkan gelendong jarum ke dalam alat pencucuk dan pada masa yang sama tekan butang cucukan atau pegang alat pencucuk dengan butang cucukan bersentuhan dengan permukaan seperti atas meja. Ini boleh melepaskan jarum dan menyebabkan kecederaan secara tidak sengaja.

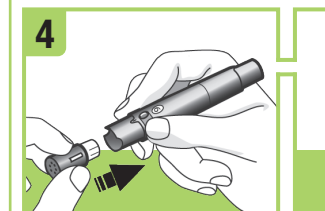


Masukkan gelendong jarum, hujung putih dahulu, ke dalam alat pencucuk. Tolak gelendong jarum masuk sepenuhnya sehingga ia klik ke dalam tempatnya dengan kukuh.



**NOTA**  
Jangan keluarkan gelendong jarum sehingga kesemua 6 jarum telah digunakan memandangkan gelendong jarum tidak boleh digunakan semula selepas ia telah dikeluarkan dari alat pencucuk.

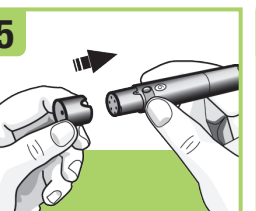

Pasang semula penutup pada alat pencucuk. Pastikan takuk pada penutup selari dengan takuk pada alat pencucuk.

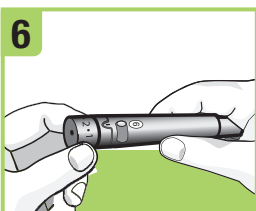


Laraskan kedalaman jarum kepada tahap kedalaman sesuai. Mula dengan 2. Untuk kulit yang lebih tebal, tukar kepada nombor yang lebih tinggi.



Menggunakan alat pencucuk: Dengan menekan butang cucukan, alat pencucuk mencucuk dengan 1 klik.

### Menjalankan Pengukuran Glukosa Darah

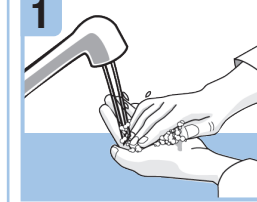


Cuci dan keringkan tangan anda sebelum anda menjalankan pengukuran glukosa darah.




Periksa tarikh tamat tempoh simpanan pada bekas jalur ujian. Jangan gunakan jalur ujian yang melepasi tarikh tamat tempoh simpanan.




Keluarkan satu jalur ujian dari bekas jalur ujian. Tutup penutup dengan ketat.

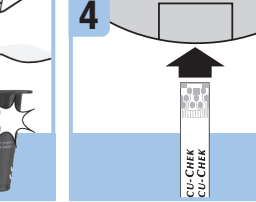


Masukkan hujung besi jalur ujian ke dalam meter.

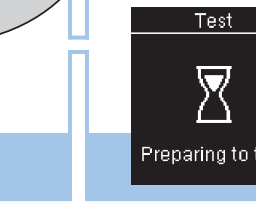


Meter akan hidup. **Preparing to test** (Sedia menguji) muncul.

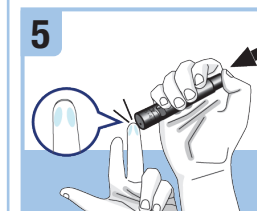


Tekan alat pencucuk dengan tepi hujung jari anda secara kuat dan tekan butang cucukan untuk mencucuk jari anda.

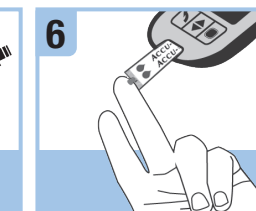


Sentuhkan **hujung kuning** jalur ujian kepada titisan darah. Alihkan jari anda daripada jalur ujian apabila **Analyzing** (Sedang menganalisis) muncul. Jangan letakkan darah pada bahagian atas jalur ujian.

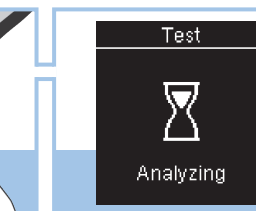

Nilai pengukuran muncul pada paparan dalam masa kurang dari 4 saat.

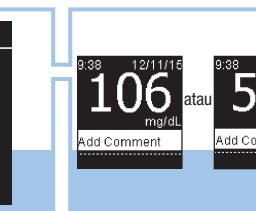

Nilai pengukuran muncul pada paparan dalam masa kurang dari 4 saat.

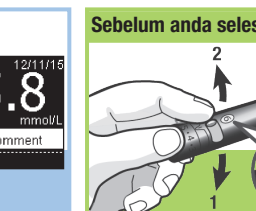

Nilai pengukuran muncul pada paparan dalam masa kurang dari 4 saat.



Sediakan alat pencucuk untuk pengukuran glukosa darah seterusnya. Tolakkan tuil ke hujung yang lain dan kembali ke hujung asal sekali untuk teruskan kepada jarum seterusnya. Tingkap kecil menunjukkan bilangan jarum yang tinggal.

Muat turun aplikasi pengurusan diabetes Accu-Chek Connect\* yang percuma di:



\*Tersedia untuk peranti mudah alih terpilih.

SEMAKAN TERAKHIR: 2015-09

Roche Diabetes Care GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim, Germany  
www.accu-chek.com



ACCUCHEK, ACCUCHEK CONNECT, ACCUCHEK GUIDE dan FASTCLIX adalah tanda dagang Roche.

APPLE, logo APPLE dan APP STORE ialah tanda dagangan Apple Inc.

GOOGLE PLAY ialah tanda dagangan Google Inc.

© 2016 Roche Diabetes Care  
07656939001-0216  
07656939001(01)-0216

